

Agulhas Descartáveis para Fístula **Arteriovenosa**

Safety Needle



- ▶ Agulha de parede ultrafina e bisel trifacetado com corte a laser.*
- Lúmen da agulha com duplo revestimento de silicone.*
- ▶ Back-eye.*



▶ Bainha de proteção com clique audível.**




Asa com texturização para maior firmeza no momento da punção.



Tubo flexível e macio.

- *Diminuição do dano à pele e ao vaso, minimizando a resistência do fluxo de sangue.
- **Sistema de segurança audível e movimento em sentido único, evitando acidentes com perfurocortantes.

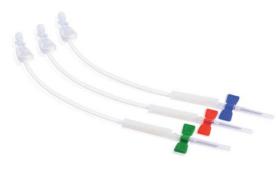



Agulha de FAV Dora® - Safety Needle

COR DA ASA	DIÂMETRO EXTERNO	FLUXO (ML/MIN)	CALIBRE
AZUL	1,83 mm	350-450 ml/min	15 Ga
VERDE	1,65 mm	300-350 ml/min	16 Ga
VERMELHA	1,47 mm	< 300 ml/min	17 Ga







Esterilizado por óxido de etileno, produção 100% automatizada.

Passo a passo para a retirada da agulha



Com uma das mãos, pressione levemente a gaze no local da punção, antes da remoção da agulha; com a outra mão, coloque a bainha de proteção perto da asa.



Ajuste a direção da bainha de proteção, certifique-se de que a asa da agulha esteja paralela à entrada do protetor.



Use o polegar e o dedo indicador para segurar a bainha de proteção, puxe cuidadosamente a tubulação para retirar a agulha.



Continue puxando a tubulação para trás e deslize a bainha de proteção na direção da agulha.



Continue puxando a tubulação para trás até que a agulha deslize para dentro da bainha de proteção. A mão com a gaze faz uma leve pressão no ponto de punção.



Verifique se a agulha está completamente dentro da bainha de proteção (click audível) e, em seguida, descarte a agulha em um recipiente apropriado.



